

Work - Set 2



Comfort Digisystem Work-Set 2 ist für berufstätige Menschen mit Hörbeeinträchtigungen, die am Arbeitsplatz uneingeschränkt kommunizieren wollen.

Deutliches Sprachverstehen

Mit dem Comfort Digisystem Work-Set 2 lösen Sie schwierige Hörsituationen, die im Laufe eines Arbeitstages auftreten können: größere oder kleinere Meetings, Telefonieren mit dem Handy oder dem Festnetztelefon. Auch Telefon- oder Videokonferenzen sind kein Problem.

Meetings

Das vielseitige **Conference Microphone DC20** wird auf den Tisch gestellt und nimmt die Stimmen aller Teilnehmer auf. Es lässt sich leicht durch das Referentenmikrofon DM05 ergänzen.

Telefonieren

TeleLink wird zusammen mit dem Conference Microphone DC20 an das Festnetztelefon angeschlossen. Die Stimme des Gesprächspartners wird vom DC20 über den Empfänger in das Hörsystem/Cochlea-Implantat übertragen.

Das **Microphone DM90** ist eine benutzerfreundliche Lösung für sämtliche mit Bluetooth ausgestatteten Geräte, wie z.B. Mobiltelefone, Schnurlostelefone, Computer, Laptop, Tablets usw. und ermöglicht eine einfache Nutzung ihres Mobiltelefons.

Bei einem eingehenden Anruf hören Sie das Klingeln des Mobiltelefons direkt über Ihre Hörsysteme, können mit nur einem Tastendruck das Gespräch annehmen und sind sofort mit Ihrem Anrufpartner verbunden.

Kompatibilität

Im Work-Set 2 wird das DM90 als Induktionsschleifenempfänger verwendet, der mit allen Hörgeräten, Cochlea-Implantaten oder knochenverankerten Hörgeräten mit T-Spule kompatibel ist.




Microphone DM05



Conference Microphone DC20
+ TeleLink




Microphone DM90

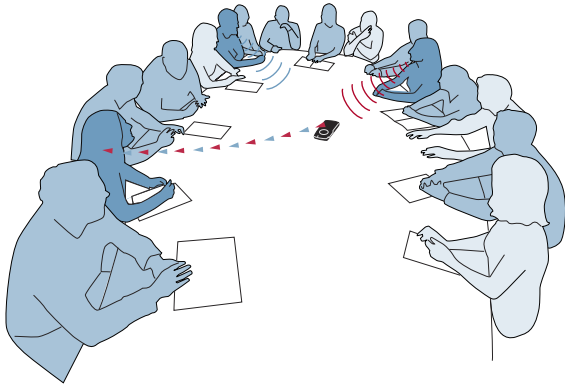


DC20 + DM90

Das Konferenzmikrofon nimmt die Stimmen sämtlicher Teilnehmer auf und sendet sie an den Empfänger der Person mit Hörbeeinträchtigung weiter.

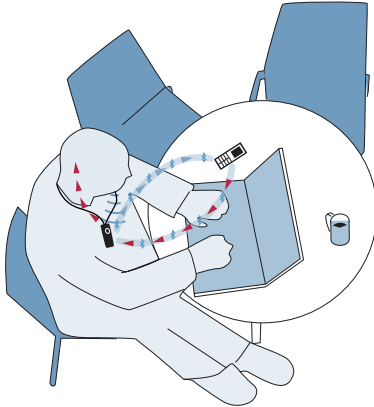

DM90

Das Handy wird über Bluetooth mit dem Microphone DM90 verbunden. Die Stimme des Gesprächspartners wird vom DM90 über eine Induktionsschleife in das Hörsystem/Cochlea-Implantat übertragen.

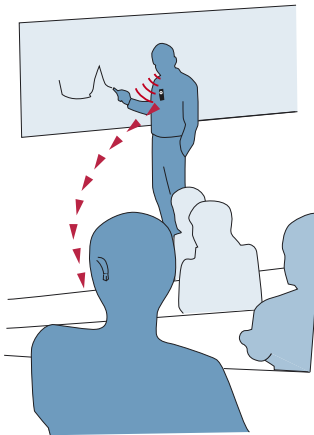

DM05 + DM90

Mit dem Microphone DM05 kann man einen Vortragenden auf eine Distanz von bis zu 30 m hören.



DC20 + TeleLink + DM90

TeleLink wird zusammen mit dem Conference Microphone DC20 an das Festnetztelefon angeschlossen. Die Stimme des Gesprächspartners wird vom DC20 über den Empfänger in das Hörsystem/Cochlea-Implantat übertragen.